


FICHE TECHNIQUE

Les aiguilles sous-cutanée Ambu® Neuroline™ et sous-cutanées à câbles jumelés Ambu® Neuroline™ sont conçues en acier inoxydable pour un équilibre entre rigidité et souplesse. Les électrodes aiguilles offrent un niveau d'impédance stable et sont dotées d'une pointe réduisant la force de pénétration.

Les câbles sont flexibles et possèdent un embout à code couleur pour faciliter l'identification des aiguilles.

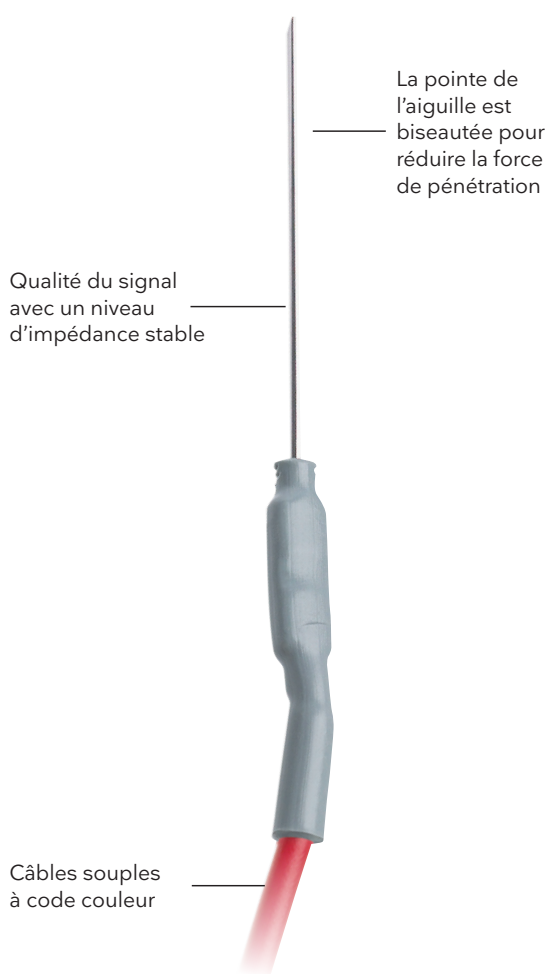

Aiguille sous-cutanée Ambu® Neuroline™ Electrode aiguille sous-cutanée à câbles jumelés Ambu® Neuroline™



BÉNÉFICES CLÉS

La pointe de l'aiguille est effilée et biseautée pour réduire la force de pénétration

Qualité du signal avec un niveau d'impédance stable

Aiguille en acier inoxydable pour un équilibre entre résistance et flexibilité

Câbles à code couleur pour faciliter l'identification des aiguilles

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Électromyographie (EMG)

Électroencéphalographie (EEG)

Potentiels évoqués (PE)

Monitoring intraopératoire (MIO)

Ambu

CARACTÉRISTIQUES

Environnement

Électrode sans latex de caoutchouc naturel
Câble sans latex de caoutchouc naturel
Emballage sans PVC

MATÉRIAUX

Électrode

Aiguille	Acier inoxydable
Câble	Fil de cuivre étamé avec isolation en PVC
Connecteur	Alliage de cuivre
Protection en plastique	Polyéthylène (PE)
Type de connecteur	1,5 mm protection contre le toucher (DIN 42 802)
Méthode de stérilisation	stérilisation par oxyde d'éthylène

Conditionnement

Sachets, couche transparente	Polyéthylène téréphthalate (PET)
Sachets, couche centrale	Polypropylène (PP)
Sachets, couche de papier	Papier
Cartons	Carton



M = connecteur 1,5 mm



Température de stockage

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Référence	Aiguille longueur	Diamètre		Câble longueur	Couleur du câble	Durée de vie en mois (sachets scellés)	Conditionnement		
	mm	mm	Gauge	cm			Quantité/ sachet	Quantité/ boîte	Quantité/ carton
Aiguille sous-cutanée									
74512-50/24	12	0,40	27G	50		60	1	24	384
74512-100/24	12	0,40	27G	100		60	1	24	384
74512-150/24	12	0,40	27G	150		60	1	24	384
74512-250/24	12	0,40	27G	250		60	1	24	384
Aiguille sous-cutanée à câbles jumelés									
74612-100/1/20*	12	0,40	27G	100		60	1	20	160
74612-150/1/20*	12	0,40	27G	150		60	1	20	160
74612-200/1/20*	12	0,40	27G	200		60	1	20	160
74612-250/1/20*	12	0,40	27G	250		60	1	20	160

*Le kit couleur 1 comprend des fils rouge, bleu, vert, jaune et orange, chacun étant couplé à un fil blanc et un fil noir. Chaque boîte contient 2 exemplaires de chaque combinaison de couleurs.

**Le kit couleur 2 comprend des câbles violet, gris, marron, rose et beige, chacun étant couplé à un câble blanc et un câble noir. Chaque boîte contient 2 exemplaires de chaque combinaison de couleurs.

74512-50/24 ● Composant ● Longueur de l'aiguille ● Longueur de câble ● Quantité par boîte

Ambu

Distribué par :

Ambu SARL

43-45 Rue d'Armagnac
CS 72073
33088 Bordeaux cedex
Tel.: (33) 05 57 92 31 50
www.ambu.fr

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
Ballerup
DK-2750 Denmark
T: +45 72 25 20 00
www.ambu.com

Ambu BV

4 Rue de la Presse
1000 Bruxelles
Belgique
Tel.: +32 02 227 27 37
Fax: +32 02 218 31 41
www.ambubel.be

CE 2797